

# SORBACT® ABSORPTION DRESSING

Infektionsforebyggende absorptionsbandage



## REDUCERER DEN MIKROBIOLOGISKE BELASTNING I MODERAT TIL KRAFTIGT VÆSKENDE SÅR

*Sorbact® Absorption Dressing er en sårbandage, der binder bakterier og svampe. Den består af et grønt Sorbact® sårkontaktlag kombineret med en absorberende kerne og en hvid bagside. Sorbact® Absorption Dressing absorberer og holder på eksudat, hvilket reducerer risikoen for maceration, og opretholder et fugtigt sårmiljø. Bandagen kan anvendes til kompressionsterapi.*

Produkt	Varenr.	Størrelse	Stk. / æske
Sorbact® Absorption Dressing	98224	7x9 cm	20
Sorbact® Absorption Dressing	98222	10x10 cm	20
Sorbact® Absorption Dressing	98223	10x20 cm	10




## TILSIGTET ANVENDELSE

Sorbact® Absorption Dressing er beregnet til brug i behandlingen af rene, koloniserede, kontaminerede eller inficerede sår, der er moderat til kraftigt væskende, såsom postoperative sår, traumesår, tryksår, diabetiske sår og sår på fødder og ben.

## BRUGSANVISNING

1. Forbered såret i overensstemmelse med lokal klinisk praksis.
2. Vælg en passende bandagestørrelse til såret. Sårpudden skal dække såret med et overlap på mindst 2 cm.
3. Fjern bandagen fra posen ved steril teknik.
4. Læg bandagen på. Sørg for, at den grønne side af kontaktlaget er i direkte kontakt med hele såret.
5. Fiksér med passende sekundærbandage.
6. Bandagens skiftefrekvens afhænger af sårets ekssudatniveau samt såret og den omgivende huds generelle tilstand. Bandagen kan sidde i op til 7 dage, hvis den kliniske tilstand tillader det.

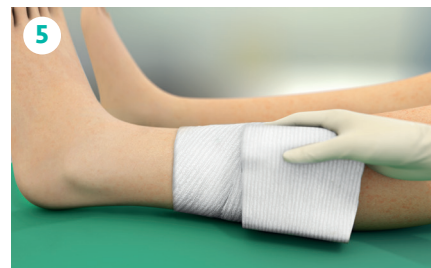

## SORBACT® – FOREBYGGER INFEKTION

Sorbact® bakteriebindende bandage forebygger og behandler sårinfektioner ved at reducere den mikrobiologiske belastning i såret på naturlig vis. Mikroorganismene bindes irreversibelt til bandagens overflade og fjernes, når bandagen skiftes.