


SORBACT® COMPRESS

Infektionsforebyggende kompres

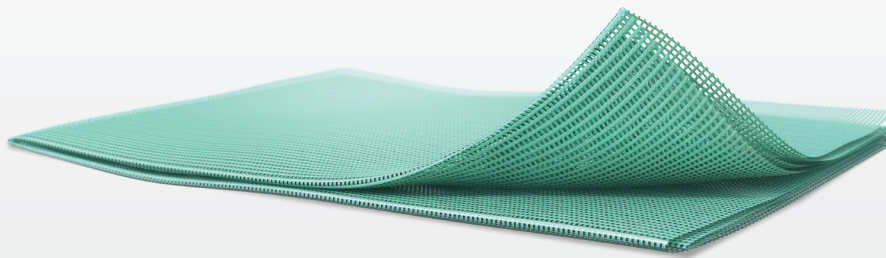

ET SÅRKONTAKTLAG DER REDUCERER DEN MIKROBIOLOGISKE BELASTNING

Sorbact® Compress er en steril sårbandage, der binder bakterier og svampe. Den består af et grønt Sorbact® sårkontaktlag, hvor ekssudatet kan trænge igennem til en sekundærbandage. Bandagen er foldet i 8 lag. Bandagen kan anvendes i kompressionsterapi.

Produkt	Varenr.	Størrelse	Str. udfoldet	Stk. / æske
Sorbact® Compress	98128	4x6 cm	11x15 cm	40
Sorbact® Compress	98125	7x9 cm	17x28 cm	40





TILSIGTET ANVENDELSE

Sorbact® Compress er velegnet til brug i behandlingen af rene, koloniserede, kontaminerede eller inficerede væskende sår, såsom postoperative sår, traumesår, kavitetssår, fistler, tryksår, diabetiske sår og sår på fødder og ben.

BRUGSANVISNING

1. Forbered såret i overensstemmelse med lokal klinisk praksis.
2. Vælg en passende bandagestørrelse til såret. Bandagen kan foldes ud til en passende størrelse og kan overlappe sårets kanter om nødvendigt.
3. Fjern bandagen fra posen ved steril teknik.
4. Ved tilklipning af bandagen skal der anvendes steril teknik. Kassér åbne og ubrugte bandager.
5. Læg bandagen på. Sørg for at kompressen er i direkte kontakt med hele såroverfladen. Ved kavitetssår og fistler foldes en eller flere bandager ud og rystes let, og kaviteten eller fistlen fyldes. Undgå at udtamponere.
6. Anvend en passende sekundærbandage.
7. Bandagens skiftesfrekvens afhænger af sårets ekssudatniveau samt sårets og den omgivende huds generelle tilstand. Bandagen kan sidde i op til 7 dage, hvis den kliniske tilstand tillader det.

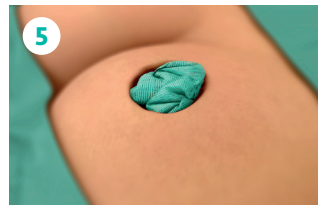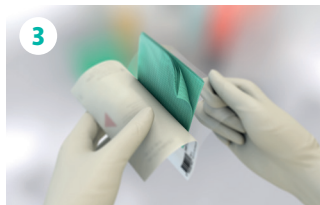

SORBACT® – FOREBYGGER INFEKTION

Sorbact® bakteriebindende bandage forebygger og behandler sårinfektioner ved at reducere den mikrobiologiske belastning i såret på naturlig vis. Mikroorganismene bindes irreversibelt til bandagens overflade og fjernes, når bandagen skiftes.