


PRODUKTDATABLAD

Mylife Clickfine® penkanyle

Penkanyle, som skal anvendes sammen med en insulinpen. Penkanylen kan enten trykkes lige på pennen indtil et klik høres, eller den kan skrues på. Skal skrues af efter brug.

Passer til gængse insulinpenne som både forfyldte og flergangsinsulinpenne.

Penkanylen er steril og facetslebet. Den del af nålen, som går igennem patientens hud, er coatet med silikone på hele overfladen, for at lette indtrængen i huden og minimere vævsskader. Penkanylen er engangsmateriale, og derfor anbefales det, at kanylen skiftes efter hver injektion.

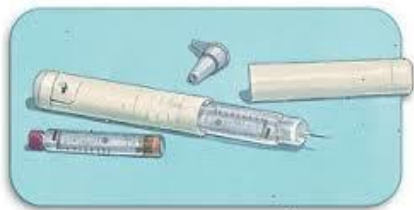

Indholdsstoffer/materiale:	Kirurgisk stål, silikone, polypropylen, polyethylen og Dymax
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ja/MDD Class IIa
Steril vare/metode:	Ja, R (Gamma)
Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:	Ja
Opbevaring:	Tørt og stuetemperatur
Holdbarhed fra produktionen:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale regler – kanylebøtte
Bortskaffelse inder emballage:	Følg lokale regler
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug

PRODUKTDATABLAD

Mylife Clickfine® penkanyle

Tæt gevind, når klikkes/skrues på insulinpen:	Ja
Passer på gængse insulinpenne:	Ja
Batchnummer:	Ja
Dansk mærkning på emballagen:	Ja
Dansk brugsanvisning:	Ja
Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.
Bemærkninger:	Engangsbrug

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
3080084	3200927	Mylife ClickFine penkanyle	10 mm x 0,33 mm (29G)	æske a 100 stk.
3080086	3200928	Mylife ClickFine penkanyle	12 mm x 0,33 mm (29G)	æske a 100 stk.

* Henviser til producentens reference nr.